

Mascherine chirurgiche facciali ad uso medico - Tipo IIR

monouso / non-sterile



Conf. 50 pezzi



Conf. 10 pezzi

Mascherina chirurgica 3 strati in TNT

Disponibile in colore nero

Mascherine chirurgiche facciali ad uso medico - Tipo IIR

monouso / non-sterile



CARATTERISTICHE


Mascherina chirurgica monouso di tipo IIR in morbido tessuto-non-tessuto (TNT), con filtro ad elevata efficienza, priva di lattice, ipoallergenica e traspirante. La mascherina è dotata di elastici auricolari che garantiscono grande comodità e aderenza a una vasta gamma di conformazioni del viso.

Il suo utilizzo è consigliato in sale operatorie ed in attività sanitarie, e come misura protettiva laddove non sia possibile adottare la distanza minima di sicurezza anti-contagio.

Una volta usate, le mascherine monouso debbono essere immediatamente smaltite all'interno del bidone della raccolta differenziate, reggendola dagli elastici auricolari ed evitando contatti con la superficie.

Confezionamento: Busta 10 pz. / Box 50 pz.

DETTAGLI TECNICI

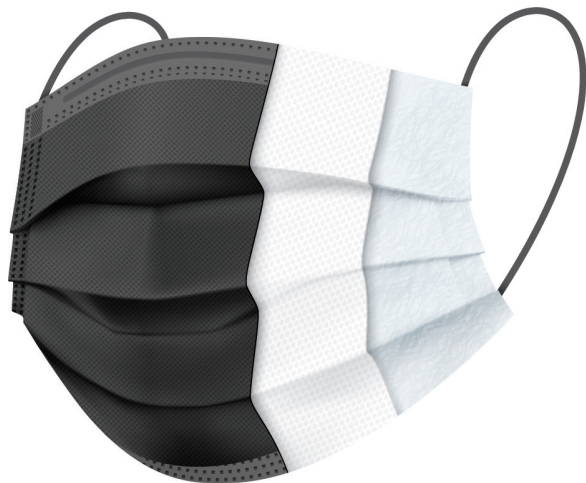

Materiale (3 strati):

- 1. Superficie esterna:** Tessuto-non-tessuto (TNT) 25 g/m²
- 2. Filtro:** Polipropilene Melt-Blown
- 3. Superficie interna:** Tessuto-non-tessuto (TNT) 25 g/m²

Dimensioni: 17.0 * 9.5 cm

Tipo: Tipo IIR - monouso / non sterile

Standard Filtrazione: EN 14683: 2019+AC2019

Progressivo di registrazione Dispositivo Medico: 2152450

Condizioni di conservazione: immagazzinare in luogo fresco e asciutto. Non conservare a temperature superiori a 40° C. Non esporre a luce solare diretta, luce UV e lampade fluorescenti. Se il confezionamento è danneggiato o bagnato scartare il prodotto. Non utilizzare oltre la data di scadenza (riportata sulla confezione)

Shelf life: 5 anni dalla data di produzione

FUNZIONI

Le mascherine chirurgiche tipo IIR sono consigliate per l'uso da parte di operatori sanitari in sala operatoria, in particolare in situazione epidemiche o pandemiche. Forniscono una protezione nei confronti della diffusione dell'influenza sia bloccando le goccioline di secrezioni respiratorie emesse dalle persone malate che le indossano, sia impedendo che le medesime goccioline o spruzzi di secrezioni o altri fluidi biologici raggiungano le mucose di naso e bocca.



Mascherine chirurgiche facciali ad uso medico - Tipo IIR

monouso / non-sterile


MADE IN ITALY

ISTRUZIONI PER L'USO

Controllare l'integrità dell'involucro prima dell'uso. Se la confezione è rotta, non utilizzare.

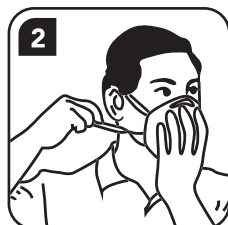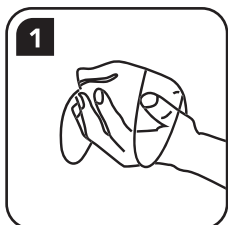

1. Aprire la scatola, prendere la mascherina dai lati esterni con entrambe le mani
2. Distendere la mascherina appoggiandola sul viso e facendola aderire su naso, bocca, mento e fissando i laccetti dietro le orecchie
3. Adattare lo stringinaso al naso
4. Verificare che la mascherina aderisca bene al viso e sia comoda da indossare
5. Indossare correttamente come da simbologia.

INDICAZIONI

Questa maschera non deve essere utilizzata se l'uso previsto della maschera è quello di proteggere l'indossatore da agenti infettivi (batteri, virus e funghi).

Non utilizzare la mascherina se porti la barba o in presenza di altre condizioni che impediscano una buona tenuta tra la faccia e il bordo della maschera.

Non protegge da gas e vapori (e.g. gas anestetici, fumiganti e gas tossici).

La mascherina non è sterile. Non deve essere utilizzata in tutte le procedure che richiedano il requisito della sterilità.

Per impedire potenziali contaminazioni, non riporre la mascherina in tasca o dentro a indumenti/borse e non appoggiare la mascherina su superfici. Se, durante l'uso, dovesse rendersi necessario rimuovere la maschera, evitare contatto con mani / naso / bocca e la superficie esterna della maschera. Smaltimento assimilabile a quello dei rifiuti urbani indifferenziati, inserire possibilmente le mascherine monouso usate in un sacchetto. Non gettare la mascherina monouso in contenitori dedicati a utilizzi differenziati.

IMPORTANTE

La mascherina è in grado di filtrare alcuni agenti contaminanti, ma un utilizzo scorretto può causare contagio e conseguente malattia, fino alla morte. Per un uso corretto, seguire attentamente le istruzioni d'uso. Materiali in diretto contatto con la pelle possono causare una reazione allergica in certi individui ipersensibili.